



(teléfonos iPhone)

MONITOREANDO TU PRESIÓN SANGUÍNEA.

Paso 1.

Descarga SmartView MD en la tienda de aplicaciones de Apple



Paso 2.

Llena tu perfil y selecciona Monitor de Presión Sanguínea y Submit

Health Care Provider
* Select your primary

Submit

☒ Blood Pressure Monitor
☐ Blood Glucose Meter
☐ Continuous Glucose Monitor
☐ Peak Flow Meter
☐ Fingertip Pulse Oximeter

Phone
Required

Date Of Birth

Paso 4.

Toma los datos de tus vitales en tu aparato de Presión al apretar el botón en tu aplicación llámalo Lee (el que tiene el logo de Bluetooth)

Blood Pressure Monitor

☒ Read ☒ Paired


Bluetooth

Upper Date Time
mm Hg (Systolic) 2021-6-7 19:43

Lower
mm Hg (Diastolic)

Pulse
bpm (Pulse Rate)

Note

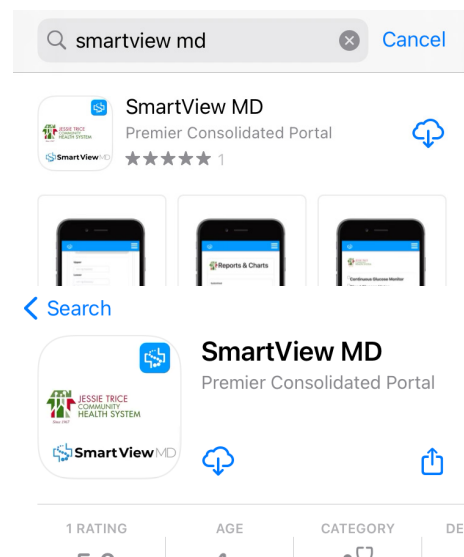

Paso 3.

Selecciona Pareja debajo de Monitor de Presión Sanguínea

Blood Pressure Monitor

☒ Pair ☐ Paired ☐ Standard

Bluetooth

Upper Date Time
mm Hg (Systolic) 2021-6-7 19:42

Lower
mm Hg (Diastolic)

Pulse
bpm (Pulse Rate)

Note

Paso 5.

Ya puedes leer los datos de tu correspondiente aparato en tu dispositivo móvil.

Blood Pressure Monitor

☒ Read ☒ Paired

Bluetooth Reading

Systolic
101

Diastolic
65

Heart Rate
59

Mean Arterial
83

Date Time
6/7/2021, 7:20:16 PM

Upper Date Time
mm Hg (Systolic) 2021-6-7 19:20

YA ESTAS LISTO!